


Sensor ^{CE}

Connectivité DICOM-PACS


Analyseur sensoriel & Lancaster virtuel

- Images de projection digitale sur chaque œil (dissociant)
- Logiciel d'analyse et de management.
- Repose menton
- Rapports PDF
- Simple et rapide

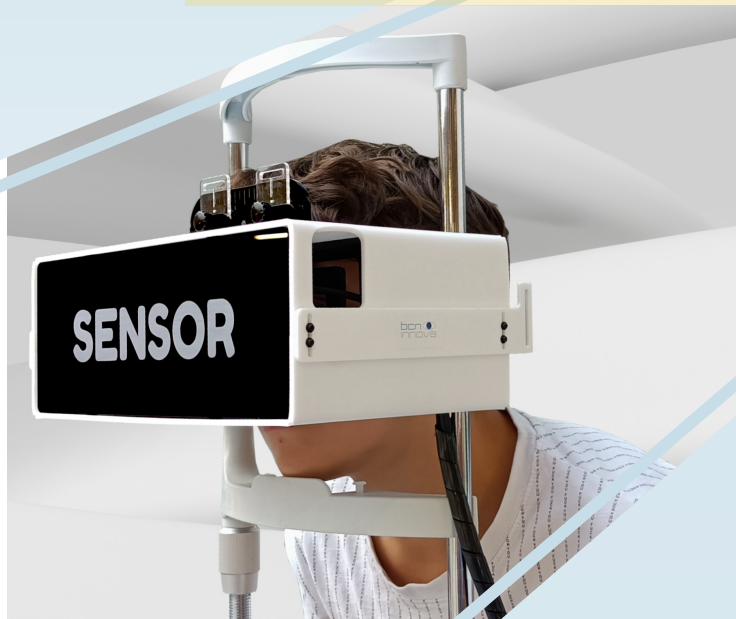

Explorations sensorielles :

1. Mesure subjective de l'angle
2. Mesure de la suppression du scotome
3. Mesure de l'intensité de la suppression
4. Mesure de la fusion
5. Mesure de la rotation de l'œil
6. Mesure de la stéréopsie
7. Mesure de l'anisékonie

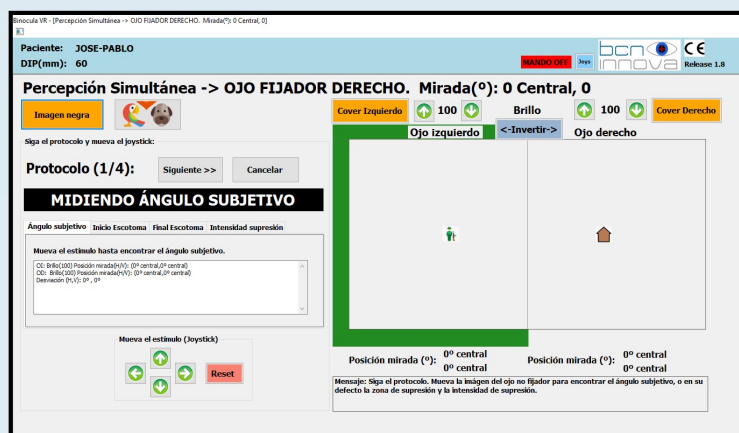

oriol.prat@bcninnova.com




+34 619 52 56 10



BCNINNOVA
AV. CAN BORDOLL 119
08202 SABADELL (SPAIN)

Spécifications techniques:

Item	Specifications
Menton	Mentonnière adaptable verticalement à la position naturelle du patient.
Écran de projection	Projection des images sur un écran dissocié. Résolution 4K. Grand angle de vue (jusqu'à $\pm 40^\circ$ horizontalement et verticalement).
Optique	Optique prismatique F=40mm
Précision	1 degré.
Rapports finaux	Rapports de résultats au format PDF. Photographie des stimuli et des graphiques.
Intégration	1. Connectivité DICOM. 2. Téléchargement des rapports sur le serveur central de l'hôpital.
Accessoires	Repose-main avec dispositif de capteur attaché. Logiciel du capteur sur clé USB. La commande du joystick prend des mesures.
Connectivité	Dispositif connecté via USB (5V, 500mA) et HDMI.
Masse	Moins de 500gr.
Volume	Dispositif avec protège-menton 60 X 28 X 15 cm.
Extras	Ordinateur portable ou de bureau / Assemblage et session de formation / 2 ans de maintenance étendue.

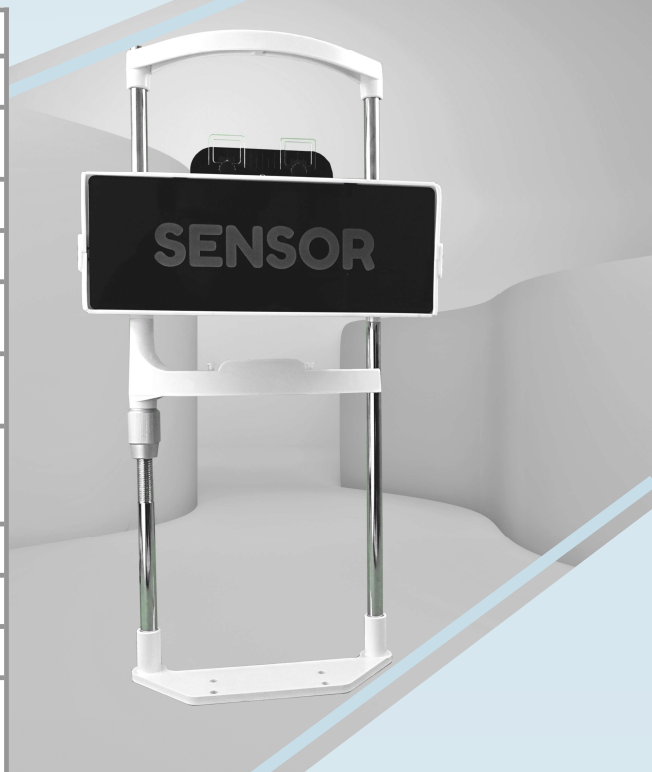

Exploration virtuelle Lancaster :

- Test de Lancaster avec différents stimuli visuels.
- Mesure de la déviation du regard dans n'importe quelle position du regard (déviation horizontale et verticale)
- Rapports PDF avec mesures et graphiques.

